

Sensore intraorale

DCiS/ DC-Air®/ Athlos-Air®/ Athlos-1



Specifiche tecniche

Rilevatore	silicio/CMOS a conversione diretta, cristallo singolo
Dimensione fisica del pixel	26 µm
Parametri di esposizione	0,05 a 0,5 s; 60 a 70 kV; 2-8 mA
Area attiva	35.1 x 24.7mm ²
Profondità in scala di grigi	16 Bits
Numero di pixel	1,249,920
MTF	>70% @ 5lp/mm >40% @ 10lp/mm



Caratteristiche

Modalità di funzionamento del sensore	global shutter
Attivazione	automatica all'avvio dei raggi X
Sicurezza: memoria di archiviazione integrata	1 immagine
Portata	fino a 3 m
Ciclo di ricarica	fino a 10 ore (fino a 300 radiografie)
Accelerometro	N/A
Indicatore di carica della batteria	Sì
Servizi di localizzazione BLE per la ricerca del dispositivo	Sì, quando il sensore è acceso
Tempo tra acquisizione e visualizzazione	circa 6 secondi
Sensibilità BLE Rx	-89 dB
Docking Station	Aggancio magnetico, robusto e pratico



Alimentazione della Docking Station

Tensione di ingresso	+5V ± 10%
Potenza di ingresso (max)	2.5W



Batteria del sensore

Tipo	Lithium-Ion
Capacità	32 mAh

DCiS/ DC-Air®/ Athlos-Air®/ Athlos-1 Sensore intraorale wireless con sensore di imaging digitale a raggi X di dimensione universale 1.5, ideale per la diagnostica intraorale odontoiatrica. DCiS / DC-Air®/ Athlos-Air®/ Athlos-1 è indicato per la popolazione generale. DCiS / DC-Air®/ Athlos-Air®/ Athlos-1 impiega la tecnologia di conversione diretta. È destinato all'uso da parte di un professionista odontoiatra per l'esame radiografico, a supporto della diagnosi di patologie dei denti, della mandibola e delle strutture orali.

DCiS/ DC-Air®/ Athlos-Air®/ Athlos-1 impiega la tecnologia Bluetooth® Low Energy (BLE 5.0) per trasferire l'immagine radiografica acquisita a una Docking Station, che la inoltra a un PC diagnostico collegato. Niente cavi ingombranti, scomodi e fastidiosi. Libertà. Il sensore intraorale wireless BLE 5.0 offre la velocità dei sensori cablati e il comfort delle placche ai fosfori, grazie all'eliminazione del cavo e all'uso dei supporti Zero Profile®, l'accuratezza dell'immagine (IA) senza precedenti della conversione diretta e i vantaggi di workflow della connettività Truly Wireless®.

Interfacce

Radio	Bluetooth © Low Energy (BLE 5.0)
Cablato	USB 2.0 High Speed
Tipo di connettore (Docking Station)	USB-C
Tipo di cavo (Docking Station verso PC)	USB-C a USB Type A



Caratteristiche ambientali

Temperatura ambiente di esercizio	+10°C a +40°C
Temperatura di trasporto	-20°C a +50°C
Stoccaggio a lungo termine	0°C a +40°C
Umidità (senza condensa)	30%RH - 95%RH
Grado di protezione IP	IP67 potenziato
Conformità	ISO 10993
Incapsulamento	saldatura a ultrasuoni robusta
Materiale di incapsulamento	PPSU con eccezionale stabilità idrolitica e tenacità



Software (integrazione OEM)


Athlos SDK, con esempi di codice sorgente per l'integrazione e filtri avanzati ad adattamento locale.

Il formato delle funzioni di chiamata è definito in linguaggio C++.




Software (utente finale)

Interfaccia TWAIN a singolo livello ottimizzata. Software di imaging supportati: Dentrix Ascend, Eaglesoft, Open Dental, Dexis, TigerView, Romexis, Acteon, Apteryx, tab32, MOGO, Dovetail, Curve Dental, XDR Radiology, TDO, VistaSoft, Theia, DentalEye, ArchiMED suite e molti altri software compatibili con TWAIN.

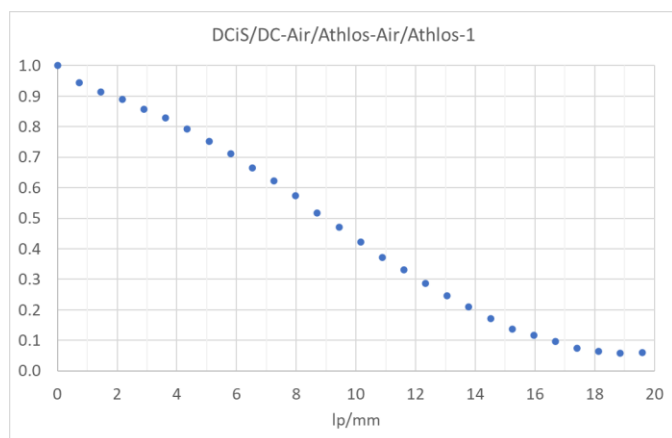

Funzione di trasferimento della modulazione: accuratezza dell'immagine (Image Accuracy, IA)

WIOS-S2

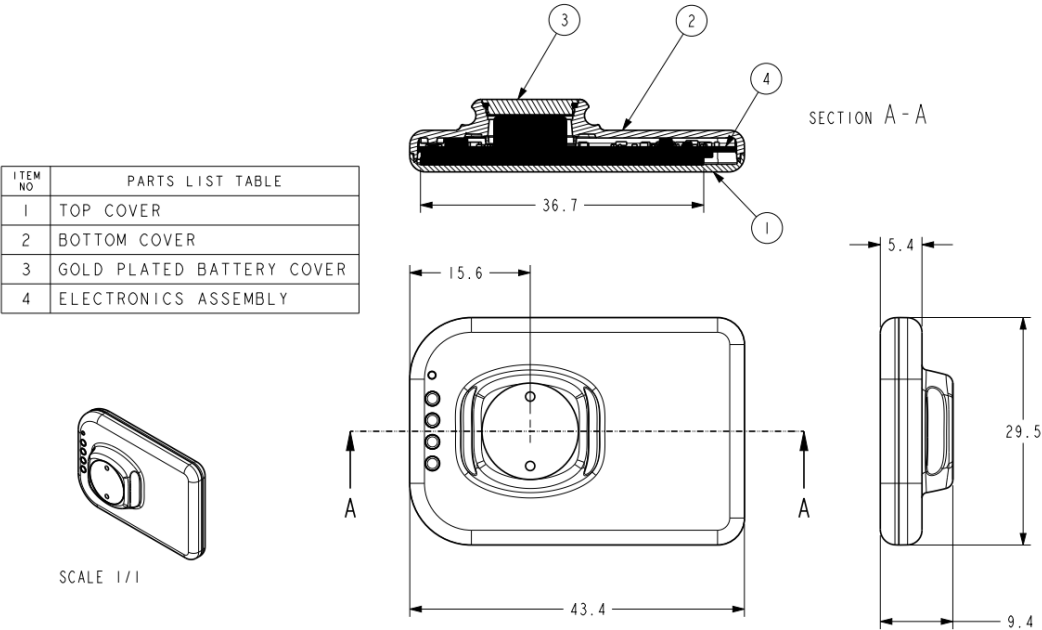

WIOS-DS2

